


ロールオンリフトブラシ

品番 E-HF010WS

取扱説明書

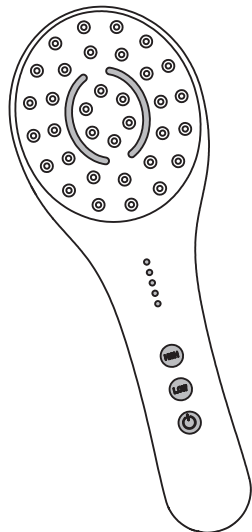

もくじ

安全のために必ずお守りください	2～5
セット内容及び各部の名称	6
お使いになる前に	7
使い方	8～9
お手入れ方法	10
保管及び廃棄	10
故障かなと思ったら	10～11
仕様	11
保証とアフターサービス・保証書	12

保証とアフターサービス 必ずお読みください。

- 保証書**
保証書は指定期間の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合保証書の記載内容に従って修理いたします。
- 保証期間をすぎて修理を依頼される場合修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理いたします。
- 補修用部品の最低保有期間
当社はこの「ロールオンリフトブラシ」の補修用性能部品*を製造打ち切り後最低2年間保有しております。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持する為に必要な部品です。
- ご使用中に普段と異なる状態になりましたら、ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店で点検・修理を依頼してください。
※お客様ご自身での分解・修理は危険です。絶対にやめてください。

お客様相談窓口

フリーダイヤル **0120-540-743** 受付時間 土日、祝日を除く平日 10:00～17:00

株式会社クレオテクノロジー 〒939-3524 富山県富山市水橋伊勢屋 158-1

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。
また、読み終わった後はいつでも取り出せる場所に大切に保管してください。

- 安全のため、**警告及び注意表示**を必ず守ってください。
- 初めて使用する際は必ずプレテスト(P7参照)を行い、“LOWモードのレベル1”から始めてください。
- 連続使用時間は10分以内とし、10分を超える過度な使用はやめてください。
- 使用時に動作音や共振音がある場合がございますが、機能に影響はございません。
- 本製品は防水仕様ではございません。
- 乳幼児やペット**が本製品に近付かないようにご注意ください。

改良のため、デザインや仕様の一部を予告なく変更している場合があります。ご了承ください。




株式会社クレオテクノロジー

2022年12月発行

安全のために必ずお守りください






本書記載の警告および注意事項を守らずに生じた事故につきましては一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

警告・注意表示について


 危険	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡や重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容です。
 警告	取り扱いを誤った場合、使用者が死亡や重傷を負う恐れがある内容です。
 注意	取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。

安全記号について


この取扱説明書では、安全に関する警告や注意を記載する場合、以下の記号を併記して注意を促しています。

	絶対に行わないでください。		必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
	強制・指示		絶対に分解・修理・改造はしないでください。
	絶対に触れないでください。		









危険

















	次のような医用電子機器との併用はしないでください。 ●ペースメーカーなど体内植込式医用電子機器●人工心肺など生命維持用電子機器●心電計など装着型医用電子機器
--	---





警告













	本製品およびACアダプターを浴室／サウナなどで使用しないでください。感電・発火・ショートがあります。
--	--

警告

	次のような方は使用しないでください。事故やトラブルの恐れがあります。不明な点は医師に相談の上その指示に従ってください。 ●急性疾患のある方●内臓疾患のある方●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある人●体温38℃以上（有熱期）の方（例：急性炎症症状 [けん怠感、悪寒、血圧変動など] の強い時期、衰弱している場合）●脊髄の骨折、捻挫、肉離れなど、急性[とう痛性]疾患の方●血圧異常のある方●伝染病疾患、結核症疾患のある方●悪性腫瘍のある方●血液疾患のある方●皮膚病、アトピー性皮膚炎、接触性皮膚炎など皮膚に既往症がある方●アレルギー体質、特に肌や皮膚が敏感な方●ステロイド系ホルモン剤の長期使用や肝機能障害による毛細血管拡張を起こしている方●疲労の激しい方、体調がすぐれない方●飲酒や薬を服用中の方●日焼けによる炎症を起こしている方●医師に運動を禁じられている方●安静を必要とする方●妊娠中、または妊娠の可能性のある方●出産直後の方●生理中の方●上記以外に異常を感じている方
	次のような方は使用しないでください。髪の毛がからみつки、髪を傷める原因となります。 ●植毛をされている方●部分かつら（テープ貼り付け、エクステンションを含む編み込みなど）を装着中の方
	次のような方は必ず適切なサポートのもので使用してください。 ●高齢の方●身体に障害のある方●自分で意思表示できない方●温度や刺激の感覚が自覚できない方●その他、一人での運動が不安な方
	乳幼児や成長期の子供には使用しないでください。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもと使用してください。
	本製品は国内で使用してください。海外では使用できません。
	本製品の隙間に手指を挟まないよう注意してください。
	下記部位には使用しないでください。事故や肌／身体へのトラブルの恐れがあります。不明な点は医師に相談の上その指示に従ってください。 ●整形手術をした部位●当日、脱毛処理をした部位●眼球／まぶた／目のまわり／耳／鼻骨／くちびる／口内や陰部、粘膜など●湿疹のある部位●のど●かぶれ、にきびなど炎症を起こしている部位●皮膚トラブルのある部位（例：物理的刺激などによる病的なシミやアザなど）●キズのある部位●膨らんだホクロ●ウイルス性のイボ●骨折部位●胸部および肩甲骨などの心臓の周辺部位●金属／プラスチック／シリコンなどを埋め込んでいる部位●タトゥーのある部位●かゆみ／物的刺激などによる炎症などのある部位
	歯の治療中、歯に詰め物がある人は、レベルを下げて使用してください。強い違和感を覚える場合は、医師に相談してください。


 警告	
	使用中または充電中に異常発熱する場合は直ちに使用を中止してください。故障や発火の原因となります。
	本製品は家庭での使用を目的に作られております。業務用での使用など過剰な使用はしないでください。また、用途以外の目的で使用しないでください。
	ネックレスなどの金属類をつけたまま使用しないでください。強いショックを受ける恐れがあります。
	本製品はリチウムイオン充電電池を内蔵しております。火中投下や加熱をしないでください。また、次のような環境での使用、充電、放置、保管は絶対にしないでください。発熱、破裂、発火、故障または事故やトラブルの原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ●火や熱器具の近く ●こたつや布団、毛布の中 ●直射日光の当たる場所 ●炎天下の車内 ●高温になる場所 ●ホコリの多い場所 ●湿気の多い場所 ●傾斜、振動、衝撃のある場所 ●屋外 ●強い電波や磁気の発生する場所 ●子供の手の届く場所
	本製品に異常を感じた場合はただちに使用を中止し、お客様相談窓口 (P12 参照) までお問い合わせください。
	乳幼児やペットの手の届く場所に保管しないでください。事故やトラブルの恐れがあります。
	本製品を落としたりぶつけたりしないでください。故障、または事故やトラブルの恐れがあります。
	自分で意思表示ができない方には使用させないでください。また、身体の不自由な方だけの使用は避けてください。事故やケガの恐れがあります。
	ACアダプターおよび充電用USBケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。火災、感電、故障の原因となります。
	必ず交流 100V で使用してください。ACアダプターや充電用USBケーブルが破損しているときは使用しないでください。
	付属の AC アダプター、充電用 USB ケーブル以外は使用しないでください。また付属の AC アダプター、充電用 USB ケーブルを他製品で使用しないでください。故障の原因となります。
	 濡れた手で AC アダプターや充電用 USB ケーブルをコンセントから抜き差ししないでください。感電・ショート・発火の原因となります。
	極度の痛みや不調、異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。トラブルの原因となります。
	連続使用時間 (10 分) や使用頻度 (1 日 2 回まで) は必ず守ってください。EMS を再度同一部位に使用する場合は 24 時間以上間隔をあけてください。初めて使用する方や使い慣れていない方、敏感肌の方は、使用時間を短めにして “LOW モードのレベル 1” から様子を見ながら使用してください。

 警告	
	使用後のお手入れの際は必ず電源を OFF にし、AC アダプターをコンセントから抜いてください。火災やケガの原因となります。
	使用中に異常が発生した場合は、電源を OFF にし、ただちに使用を中止してください。充電中に異常が発生した場合は、コンセントから AC アダプターを抜いてください。
	本製品を分解、修理、改造すると重大な事故につながる恐れがありますので絶対に行わず、お客様相談窓口 (P12 参照) までお問い合わせください。


 注意	
	ブラシピンを引っ張る、曲げる、叩く、強い圧をかけるなどの負荷を与えないでください。ブラシピンが折れるなど損傷する場合があります。
	使用する時は、力を入れて肌にごすりつけないでください。ブラシピンが肌に対して垂直に当たるように使用してください。また肌に十分に水分がある状態で使用し、こまめに補充してください。
	次のような場所で使用・保管しないでください。故障、または事故やトラブルの恐れがあります。 <ul style="list-style-type: none"> ●ホコリの多い場所 ●湿気の多い場所 ●直射日光の当たる場所 ●傾斜、振動、衝撃のある場所 ●屋外 ●強い電波や磁気の発生する場所 ●子供の手の届く場所 ●高温になる場所
	お手入れの際はベンジン/アセトン/シンナーなどで本製品を拭かないでください。故障の原因や製品を変形、変色させる可能性があります。お手入れ方法 (P10 参照) を必ず守ってください。
	使用する前に異常がないか確認してください。長時間使用しなかった場合は特に十分確認し、肌へのプレテスト (P7 参照) を行ってから使用してください。
	金属枠のある椅子などに座って使用しないでください。感電、けがの原因になります。
	肌に直接使用してください。衣類など布の上から使用しないでください。
	充電する際は電源を OFF にした状態で、充電口に汚れや異物がないか確認してから行ってください。故障の原因となります。
	本製品はその機構上、多少の振動音や共振音がありますが故障ではありません。
	使用後は必ず電源を切ってください。
	AC アダプターをコンセントから抜くときは必ず AC アダプターの側面を持って抜いてください。感電・ショート・発火の原因となります。

セット内容及び各部の名称


● 本体

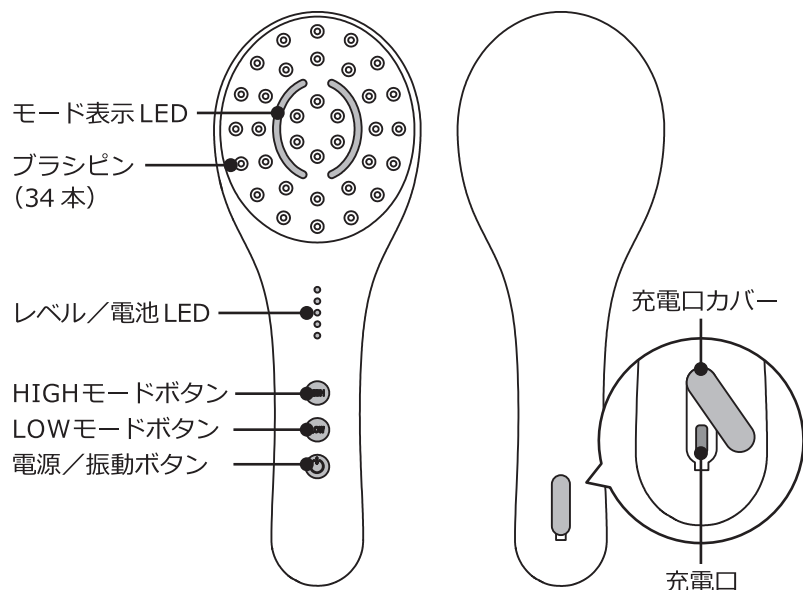


● ACアダプター

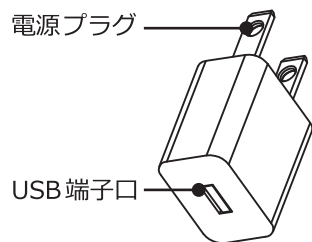

● 充電用USBケーブル

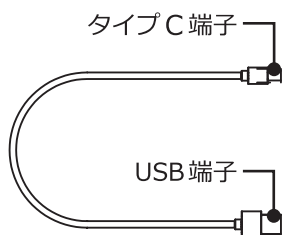

● 取扱説明書

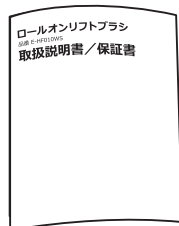


お使いになる前に

● 充電する

充電前に本体、ACアダプター、充電用USBケーブルに異常がないか、必ず確認してください。

※本体やACアダプター、充電用USBケーブルに異常があった場合は、すぐに使用をやめてください。
 ※充電する際は電源をOFFにした状態で行ってください。

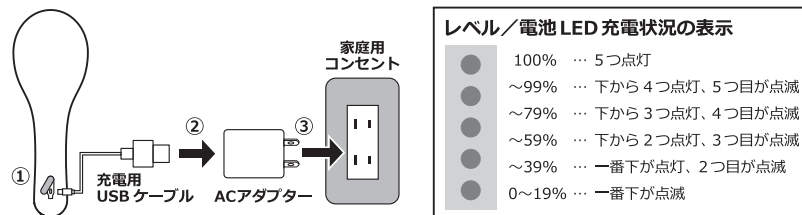

- ① 本体の充電口カバーを開き、充電用USBケーブルのタイプC端子を奥まで確実に差し込んでください。
- ② 充電用USBケーブルのUSB端子をACアダプターのUSB端子口に奥まで確実に差し込んでください。
- ③ ACアダプターの電源プラグを家庭用コンセントに差し込んでください。充電が開始され、レベル/電池LEDが充電状況に応じて点滅/点灯します。

※充電口に汚れや異物がないか確認してから充電を行ってください。
 ※電池残量がない状態から約3時間で満充電となり、約5時間の使用が可能です。
 ※約10秒経過しても充電が開始されない場合は、差し込みのゆるみがないかご確認ください。
 ※充電をしながらの使用及び本体操作はできません。
 ※長期間使用しない場合は充電に時間を要する場合があります。

肌へのプレテスト

本製品を初めてご使用になる際は、肌トラブル防止のため必ず肌との相性をプレテストしてください。

- ① 肌を清潔な状態にしてください。
 ・二の腕の内側を石鹸で洗い、タオルなどで拭き取ります。
- ② 二の腕の内側を水で濡らし、LOWモードのレベル1で約1分間動かしながら使用してください。
 ※テストした部分は擦らないでください。
- ③ 24時間以内に肌に異常(赤みやほてりなど)がないことを確認してください。

※異常が生じた場合は直ちにテストを中止してください。
 ※肌に異常が生じていないか、よく注意してご使用ください。
 肌に合わない時は使用をやめてください。



使い方

● 基本の使い方

- ・水または化粧水などでお肌を湿らせた状態で使用してください。
- ・肌が清潔な状態で使用してください。

※肌が乾燥した状態で使用すると、共振音がある場合がございますが、機能に影響はございません。肌を十分に湿らせることで低減します。

①電源／振動ボタン を長押しして、電源をONにする

- ・電源を入れると3秒間、レベル／電池LEDが点灯し、電池残量が表示されます。
- ・その後、スタンバイ中となり、モード選択可能となります。スタンバイ中はレベル／電池LEDが順に点灯します。
- ・スタンバイ中に1分間、何も操作をしないと自動的に電源がOFFになります。

②好みのモードボタンを押し、EMSレベル(5段階)を選ぶ

 LOWモードボタン … 低周波EMSによる頭・顔用のモード

 HIGHモードボタン … 高周波EMSによるボディ用のモード

- ・各モードボタンを押すとレベル1で開始します。押す毎にレベルが「1→2→3→4→5→1…」の順に変わります。
- ・モードボタン選択後約10分で、自動的に電源がOFFになります。
- ・モードを選択せずに電源／振動ボタンを押すと、振動のみで使用できます。

③お好みで電源／振動ボタン を押して、振動をON/OFFする


- ・電源／振動ボタンを押す度に振動のON / OFFが切り替わります。
- ※振動の強さは一定です。

④途中で使用をやめる際は、電源／振動ボタン を長押ししてください。

※初めて使用する方や使い慣れていない方、敏感肌の方は、使用する部位に関わらず必ずLOWモードのレベル1でご使用ください。

※本製品は防水仕様ではありません。水の中に落としたり、沈めたりしないでください。故障・事故・ケガの原因となります。

使用禁止部位

眼球／まぶた／目のまわり／耳／鼻骨／くちびる／口内や陰部、粘膜など／のど／胸部および肩甲骨など心臓の周辺部位(右図の  部位)には使用しないでください。


※その他、使用禁止部位の詳細(P3)を必ずご確認ください。



● LOWモードでの使い方


頭への使い方

LOWモードでお好みの強度(1～5)を選択してください。①前頭部から頭頂部へ向かってブラシを動かします。②側頭部 ③後頭部から頭頂部へ向かってブラシを動かします。

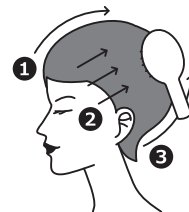

顔への使い方


LOWモードでお好みの強度(1～5)を選択してください。①首から鎖骨にかけて流すようにブラシを動かします。②顔の内側から外側へ向かってブラシを動かします。

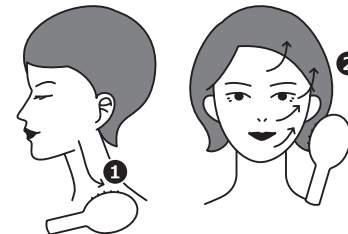

● HIGHモードでの使い方


足(腕)への使い方

HIGHモードでお好みの強度(1～5)を選択してください。①足先(指先)から体の中心へ向かって流すようにブラシを動かします。②膝(肘)から足(腕)の付け根へ向かってブラシを動かします。

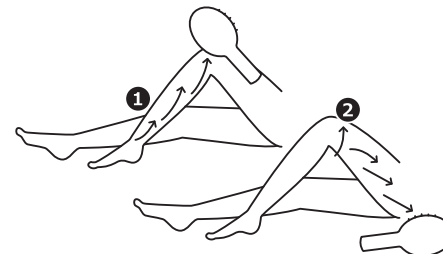

お腹への使い方

HIGHモードでお好みの強度(1～5)を選択してください。①腰回りや脇腹などを上下にブラシを動かします。②骨盤に沿って脚の付け根へ向かって流すようにブラシを動かします。他にも背中、ヒップなど全身にご使用いただけます。

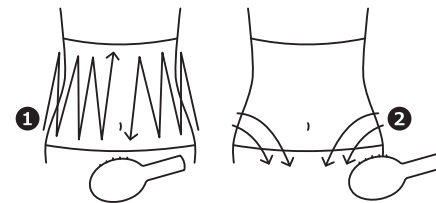

お手入れ方法

使用後は本体を清潔に保つため、毎回お手入れをしてください。

- ①電源がOFFになっていることを確認する。
- ②タオルなどの乾いた柔らかい布で、本体についている髪の毛や汚れを拭き取る。汚れがひどい時は、水または中性洗剤を染み込ませた布をよく絞って拭き取り、乾いた柔らかい布で乾拭きする。
- ③直射日光を避け、風通しの良い場所で乾燥させる。

※水気や液体が内部に入らないようにしてください。

※アルカリ洗剤やアルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは使用しないでください。

保管及び廃棄

- 汚れやホコリを取ったあと、高温多湿な場所、ホコリの多い場所は避けて、直射日光の当たらないところに保管してください。
- 長期間ご使用にならないときは、袋に入れる、または布やカバーなどをかけてホコリがつかないようにしてください。
- コード類は本体から抜き、ねじれをほどこいて保管してください。
- 子供やペットが触れない場所に保管してください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用しています。一般ごみ（不燃ごみ）と一緒に廃棄せず、お住まいの市区町村の条例に従ってください。



Li-ion

故障かなと思ったら

修理に出す前にもう一度点検してください。それでも正常に動作しないときはお買上げの販売店に修理を依頼してください。分解したり、修理、改造は絶対にしないでください。異常動作をしてけがや事故の恐れがあります。

動かない/ 表示が 点灯しない	電源が入っていない。	電源／振動ボタンを長押ししてください。
	動作が開始されていない。	モードボタンもしくは電源／振動ボタンを押して、動作を開始してください。(P8 参照)
	電池残量がない。	充電してください。(P7 参照)
急に止まった	自動OFFタイマーが作動した。	故障ではありません。再度電源ボタンを長押しし、モードを選択すると動作します。
	電池残量がなくなった。	充電してください。(P7 参照)

充電が開始されない	ACアダプター、充電用USBケーブルが正しく差し込まれていない。他製品のACアダプター、充電用USBケーブルを使用している。	ACアダプター、充電用USBケーブルの接続を確認の上、レベル／電池LEDの表示をお確かめください。(P7 参照)
EMSが強い (ビリビリする・痛い)	EMSの設定レベルが高い。	モードボタンを押して、EMSレベルを下げてください。HIGHモードを選択されている場合は、LOWモードをお試しください。 ※頭や顔には必ずLOWモードを使用してください。
	肌が乾燥している。	水や化粧水などを塗って、肌を湿らせてから使用してください。
EMSが弱い (感じない)	電極が肌に触れていない。	3つ以上のブラシピンが肌に触れるようにしてください。
	EMSの設定レベルが低い。	モードボタンを押して、EMSレベルを上げてください。LOWモードを選択されている場合は、HIGHモードをお試しください。 ※頭や顔には必ずLOWモードを使用してください。
	水分量が少ない。	使用したい部位に水や化粧水などを塗って、肌をたっぷりと濡らしてください。
動作音が鳴る	周波数による共振音です。	機構上やむをえず発生するものです。機能などに影響はありません。水や化粧水などを塗って肌を湿らせることで低減します。

仕様

品名	ロールオンリフトブラシ	製品サイズ	約250×90×50mm
品番	E-HF010WS	製品重量	約200g
アダプター定格	入力 100V 50/60Hz 0.4A 出力 5V-1000mA	材質	本体 : ABS ピン : 銅+ニッケルメッキ、ステンレス ボタン : ABS 充電口カバー : シリコン
電力	リチウムイオン電池		
充電時間・使用時間	充電時間 3 時間 使用時間 2 時間	生産国	中国
タイマー	10 分	製造販売元	株式会社クレオテクノロジー